

LANAFORM®

LA 53100 Baby Digital Scale
BABAMÉRLEG
HASZNÁLATI UTASÍTÁSA
és jótállási jegy



Magyarországon forgalomba hozza:

BonAir BG Kft

1174 Budapest

Lőrinci út 24.

Tel: 253-7285

www.bonair.hu

Gyártó:

LANAFORM

Belgium

Köszönjük, hogy a LANAFORM® digitális csecsemőmérleget választotta. A digitális csecsemőmérleg pontos, könnyen használható, és maximum 20 súlymérés eredményét képes tárolni. Homorú alakja folytán súlymérő állomásként is használható. A digitális csecsemőmérleg hasznos tartozék mind a szülők, mind a gyerekek szempontjából, a baba fejlődésének első néhány hónapjában.

ÁBRA

1. A folyadékkristályos kijelző az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:

1 Az egyes memóriák rajzfilm-figurái

Ready: A csecsemőmérleg használatra kész

Hold: A csecsemőmérleg tárolja az eredményt

2 1234: A tárolt eredmények sorszáma

Tare: A csecsemőruha tárazás funkciója


3 Telepjelző

2. Be/kikapcsoló (ON/OFF) gomb

3. Lb/kg/oz: ezzel a gombbal lehet változtatni a mértékegységet (font/kilogramm/uncia)

4. M bekapcsoló gomb: ezzel lehet a memória funkciót használni

5. Set/Tare: ezzel lehet mérni és nyugtázni a tárasúlyt.

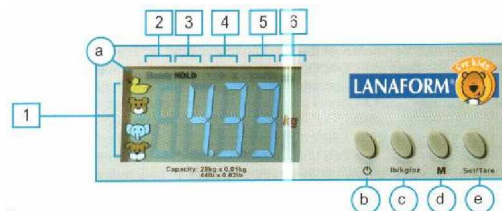

JELLEMZŐI ÉS FUNKCIÓI

- Maximum 20 kg/44 lbs/704 oz
- Világító digitális kijelző, színes képernyővel
- Tárazási funkció
- Súly mértékegység átkapcsolás funkció (kg/lb/oz)
- Telepfeszültség csökkenésének jelzője
- Automatikus kikapcsolás
- Tápfeszültség: 4 db AAA méretű elem

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Meztelen csecsemők mérésekor

- 1 Nyomja meg a be/kikapcsolót (ON/OFF), és ezzel kapcsolja be a csecsemőmérleget.
- 2 Megjelenik az utolsó mért érték, kilogrammban. Ha a súlyt fontban vagy unciában akarja kiírni, az „lb/kg/oz” gomb nyomogatásával állítsa be azt.
- 3 Néhány másodperc elteltével a csecsemőmérleg 0.00-t ír ki, a súly mértékegységével együtt. Megjelenik a készenlét (READY) ikon. Nyomja meg az „lb/kg/oz” gombot, ha más súlymértéket akar használni.
- 4 Rakja fel a csecsemőt a mérlegre. Amikor a „memóriába téve” (HOLD) jelző villog, akkor a csecsemő súlya már a memóriába kerül. Ha egy másik csecsemőt is meg kíván mérni, vegye le az első babát a mérlegről, miközben a „HOLD” jelző villog. A kijelző ekkor „---” jelet mutat, ezt követi a 0.00. Helyezze rá a második gyereket a csecsemőmérlegre.

Törülközőre vagy egyéb alátételre helyezett csecsemő mérése

1. Nyomja meg az ON/OFF kapcsolót, és ezzel kapcsolja be a készüléket.
2. Az utoljára mért érték kiíródik, a mértékegység kilogramm. Ha a súlyt fontban vagy unciában akarja kiírni, nyomja meg az „lb/kg/oz” gombot.
3. Néhány másodperc múlva a csecsemőmérleg 0.00-t ír ki, valamint a súly mértékegységét. Megjelenik a készenlét (Ready) ikon. Ha más súly-mértékegységet akar használni, nyomja meg az „lb/kg/oz” gombot.
4. Rakja fel a törülközőt vagy az alátétet a csecsemőmérlegre.
5. Nyomja meg a Set/Tare gombot, amikor a törülköző vagy az alátét súlya megjelenik, és a mikor a „memóriába téve” (HOLD) ikon villogni kezd.
6. Rakja rá a csecsemőt a törülközőre vagy alátételre, amikor a mérleg „0.00” értéket jelez. A súly mértékegységével együtt világít a készenlét (READY) ikon, és a tárazás (TARE) ikon.
7. A csecsemő súlya akkor jelenik meg, amikor a villogó „memóriába téve” (HOLD) ikon megjelenik. Néhány másodperc elteltével a kijelző „-----” jelzést ad, és a képernyő visszaáll készenléti üzemmódba. A tápfeszültség 50 másodperc után kikapcsol, ha nem mérnek meg további csecsemőt. A tápfeszültséget ki is lehet kapcsolni, az ON/OFF gomb megnyomásával.

„M” gomb

Az M gomb fő funkciója, hogy kezelje a memória kiválasztást. Az adattárolási funkció könnyítése érdekében a digitális csecsemőmérleg négy különböző rajzfilm-figurával különbözteti meg a 4 memóriát (kacsa, medve, elefánt és kutya), melyben a súlyértékek tárolhatók. Minden figura öt mérést tud tárolni, tehát összesen 20-at. Amikor a hatodik súlyt írják a memóriába, mindig a legrégebbi érték kerül törlésre.

Súlymérés az „M” gombbal

Ismételje meg az 1, 2, 3 jelű műveleteket, amikor meztelenül méri a csecsemőt.

Ismételje az 1, 2, 3, 4, 5, 6 jelű műveletet, ha a csecsemőt törülközőn, vagy más alátétén méri.

Ezt követően az alábbiakat tegye:

- 5 Mikor a csecsemő súlya megjelenik és a „memóriába téve” (HOLD) ikon villogni kezd, nyomja meg az „M” gombot. A rajzfilm-figurák és a baba súlya megjelenik.
- 6 Az „M” gomb nyomogatásával válassza ki a megfelelő rajzfilm-figurát.
- 7 Nyomja meg a „Set/Tare” gombot, hogy ezzel nyugtázza a kiválasztást. A kiválasztott figura villogni kezd, és a csecsemő súlyát tárolja. A tápfeszültség néhány másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. Ugyanazon csecsemő ismételt mérésekor ismétlje meg az 1...7 pontot. Először nyomja meg az „M” gombot, hogy kiválassza a szükséges rajzfilm-figurát, és utána nyomja meg a „Set/Tare” gombot, hogy megerősítse a kiválasztást. Ekkor memóriába kerül a második súly. A tápfeszültség néhány másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

Ha meg akarja nézni a csecsemő tárolt súlyát, a következőképpen járjon el:

A tárolt rekordok csak a tápfeszültség kikapcsolása után tekinthetők meg.

1. Nyomja meg az M gombot, hogy bekapcsoljon a készülék.
2. Megjelenik a négy rajzfilm-figura.
3. Az M gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt rajzfilm-figurát.
4. Nyomja meg a „Set/Tare” gombot.
5. Az 1. számú súly jelenik meg.
6. Ismét nyomja meg az M gombot, ha meg akarja nézni az ugyanazon rajzfilm-figura alatt tárolt különböző adatokat. A többi rajzfilmfigura alatt tárolt értékeket úgy tudja megnézni, ha kikapcsolja a csecsemőmérleget, majd előlről kezdi a fenti eljárást.
7. Ha ki akarja kapcsolni a készüléket, nyomja meg az ON/OFF kapcsolót. A tápfeszültség automatikusan kikapcsol, ha egy percig nem nyúl az „ON/OFF” kapcsolóhoz.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- A csecsemőmérleg tisztításához használjon egy puha, nedves kendőt.
- Ne használjon semmilyen karcoló hatású tisztítószert.
- Ha hosszabb ideig használaton kívül lesz a készülék, vegye ki a telepeket.
- A készüléket száraz, biztonságos helyen tárolja.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A LANAFORM® cég garantálja, hogy a csecsemőmérleg a vásárlás dátumától számított két évig gyártási- és anyaghibamentes lesz, az alább megadott kivételekkel.

Ez a LANAFORM® garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használat, baleset, nem hozzáillő tartozék felrakása, a készülék módosítása esetében, vagy egyetlen más olyan esetben sem, mely meghaladja a LANAFORM® hatáskörét.

A LANAFORM® nem tehető felelőssé semmilyen véletlen, következmény jellegű vagy specifikus kárért sem.

Amennyiben garancia alá tartozó hibás terméket kap, a LANAFORM® javítja, illetve szükség esetén cseréli az ön digitális csecsemőmérlegét, és visszaküldi Önnek, valamint megtéríti, a körülményektől függően az összes felmerült költséget. Ha a készüléket nem a Lanaform® Szervizközpont tartja karban, ez megszünteti a garanciát.

Selejtezés

A már kiszolgált készüléket adja le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi előírások szerint. Egyéb ártalmatlanítási lehetőséget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!

Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz.

Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Magyarországon forgalmazza:
BonAir BG Kft.
1174 Budapest,
Lőrinci út 24.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Fogyasztói szerződés tartós fogyasztási cikkek jótállási feltételeiről. A termék megfelel az E.E.C. irányelveknek. Köszönjük, hogy termékünket választotta. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban Ptk.) 248.§-ában foglaltakra figyelemmel, a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályai szerinti jótállási kötelezettséget vállalunk a vásárlás napjától számított **24 hónapig**.

A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti. A jótállás a fogyasztó a törvényből eredő jogait nem érinti. Fogyasztónak minősül: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból (Ptk. 685. § d. pont) a forgalmazóval szerződést kötő személy. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számlát), úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni (a 49/2003.. (VII.30.) GKM rendelet 2. § –a) . Javasoljuk, hogy a termék megvásárlásakor kapott megfizetésre vonatkozó bizonylatot, jótállási jegyet a szavatossági igény (Ptk.305. § –311/A-ig, 685§ e. pont), 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet) érvényesítése érdekében is őrizze meg. A forgalmazó köteles a termék átadásával egy időben – külön kérés nélkül – a jótállási jegyet átadni.

Jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

Ha a vásárló a termék rendeltetészerű használata mellett bekövetkező meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. Javasoljuk, hogy a termék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el és tanulmányozza a kezelési- használati utasítást. Gyártási, -összeszerelési hibából származó jótállási javítás iránti igényt a jótállási jegyen felsorolt javítószolgálatnál közvetlenül is lehet érvényesíteni.

A gyártási hibás termék átvételének és kiadásának feltételei:

1. A használat során keletkezett szennyeződésektől megtisztított terméket szabad csak átadni.
2. A hibás alkatrész kicserélése esetén csak új alkatrész építhető be.
3. A szerviz köteles a hibás termék átvételekor átvételi elismervényt, vagy azzal egyenértékű sorszámozott garanciális munkalapot kiadni. Az átvételi elismervényen, a munkalapon a következő adatokat kell feltüntetni.
 - a. A bejelentés és átvétel napját
 - b. A termék típus számát, megnevezését, gyártási számát
 - c. A termék általános állapotára utaló megállapításokat, a vásárló által bejelentett hibát vagy kifogást
 - d. Az átvett tartozékok, okmányok jegyzékét
 - e. A kijavítás várható időpontját
4. A gyártási eredetű hiba elhárítása után: a javítás módját, a beépített alkatrész cikkszámát, a javítás befejezésének időpontját a garanciális munkalapon rögzíteni kell.
5. A javítószolgálatnak törekednie kell arra, hogy a termék kijavítását 15 napon belül végezze el. Termékcseré esetén a hibás fogyasztási cikket és annak összes tartozékát, kezelési utasítását a szerviz veszi át. Törött, sérült, hiányzó tartozékok árát a vásárlónak kell megfizetnie.
6. A kijavított terméket kipróbálva, üzemképes állapotban kell kiadni. A jótállási jegy javító szelvényére a szerviz köteles beírni: a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, a hiba okát és a javítás módját, a megjavított termék visszaadásának időpontját, a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét.

A jótállási igény nem érvényesíthető:

A termék kizárólag a háztartásokban szokásos használatra készült. Ipari, kereskedelmi és vendéglátó ipari célra nem használható.

- a. A termékhez kapott kezelési utasítástól eltérő használatra, átalakításra, helytelen tárolás és szállítási sérülés miatt a sérült részekre, elemi kárra vagy egyéb nem gyártási eredetű hibára a jótállás nem vonatkozik.
- b. Olyan hibára, amely az előírt rendszeres karbantartás hiánya miatt keletkezett.
- c. Szakszerűtlen javításból származó hibára, amelyet nem a kijelölt és javítással megbízott szerviz okozott.
- d. A kopó alkatrészek természetes kopása, elhasználódása esetén.
- e. A termék üzembe helyezését, karbantartását a szerviz külön költség felszámolása mellett végzi el.
- f. A javítószolgálat nem kötelezhető a használati utasításban előírt karbantartások garanciában történő elvégzésére.

A jótállási jegy címjegyzékében történt változásokról a következő telefonszámon, faxon, e-mail címen információt adunk és tájékoztatjuk a lakóhelyéhez legközelebb lévő új szerviz elérhetőségéről.

Magyarországon forgalomba hozza és szervizeli: **BonAir BG Kft., Budapest 1174, Lőrinci út 24.**
Tel. 253-7285, Fax. 258-6992 e-mail: szerviz@bonair.hu

Típus: Vásárlás ideje:

(ph) eladó aláírása

BonAir BG Kft.

Tip.: _____

Vásárlás ideje:

Bejelentve:

Átvétel ideje:

Hiba oka:

Kijavítás ideje:

Mlsz:

Új jótállási határidő:

BonAir BG Kft.

Tip.: _____

Vásárlás ideje:

Bejelentve:

Átvétel ideje:

Hiba oka:

Kijavítás ideje:

Mlsz:

Új jótállási határidő:

BonAir BG Kft.

Tip.: _____

Vásárlás ideje:

Bejelentve:

Átvétel ideje:

Hiba oka:

Kijavítás ideje:

Mlsz:

Új jótállási határidő: